



unica

anterior

developed with
STYLE ITALIANO™

Daudzpusīga sistēma.
Nodrošina visu
priekšzobu restaurāciju

Starpzobu un kakliņa zonu
atjaunošana ar vienu
matricu

Pareiza starpzobu
kontaktzonas restaurācija,
pateicoties anatomiski
veidotām matricām

Vienkārša piekļuve
kakliņa zonai: augsta
restaurācijas un
gingivālās retrakcijas
paredzamība

Viens
risinājums
priekšzobu
restaurācijām

jaunums!

Unica
minideep
anterior

matricas
sistēma



polydentia
swiss manufacture 

Unica anterior

Polydentia klasika priekšzobu restaurācijām



- Īpaši plāns (0,03 mm) nerūsējošais tērauds ciešai kontaktzonai
- Pozicionēšanas "spārniņi" ērtākai fiksācijai
- Veidots atbilstoši anatomiski precīzām restaurācijām

Unica anterior ieteicams lietot:

- Augšējiem centrālajiem incīzīviem
- Augšējiem laterālajiem incīzīviem
- Kanīniem



jaunums!

Unica minideep anterior

vēl labāka adaptācija mazākiem priekšzobiem



- Īpaši plāns (0,03 mm) nerūsējošais tērauds ciešām kontaktvirsēm
- Uzlabota adaptācija kakliņa zonā uz apakšzokļa incīzīviem un sānu zobiem
- Pozicionēšanas "spārniņi" ērtākai fiksācijai
- Elastīgs materiāls vēl labākai pielāgojamībai
- Anatomiski veidots precīzai restaurācijai, ievērojot dabisko zobu anatomiju

Unica minideep anterior ieteicams lietot:

- Augšējiem un apakšējiem laterālajiem incīzīviem
- Apakšējiem centrālajiem incīzīviem
- Koniskiem zobiem
- Trīsstūrveida formas zobiem
- Zobiem ar šauru kakliņa diametru



Klīniskie gadījumi ar Unica anterior un Unica minideep anterior

III klases restaurācija | Dr. Giuseppe Chiodera – Itālija




IV klases restaurācija | Dr. Dan Lazar – Rumānija



V klases restaurācija | Dr. Giuseppe Chiodera – Itālija



Forma korekcija | Dr. Carlos Fernández Villares – Spānija

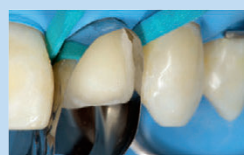

Kompozīta venīri | Dr. Jordi Manauta, DDS – Itālija



Diastēmas slēgšana uz centrālajiem incīzīviem un pegveida laterālo incīzīvu restaurācija

Dr. Osama Shaalan – Palestīna



“Unica anterior” matricu sistēma ļauj vienlaicīgi atjaunot gan proksimālās, gan kakliņa zonas malas.

unica proximal

in cooperation with
STYLE ITALIANO™

jaunums!

fokuss uz proksimālo zonu
fokuss uz formu

Priekšrocības

Precīza kontūru atveide labiāli,
palatenāli un proksimāli

Universāla forma un kontūra augšžokļa un
apakšžokļa mežiālajiem un distālajiem zobiem,
kas būtiski vienkāršo un paātrina priekšzobu
restaurāciju

Nodrošina labu redzamību un piekļuvi darba
laukam pat tad, ja vienlaikus ievietotas
vairākas matricas

Pašnostabilizējošas

Garāki kakliņa zonas pagarinājumi
nekā sānu zobu sekcionālajām
matricām

Pieejamas divos izmēros, lai nodrošinātu
optimālu piekļaušanos dažādām incizīvu
morfoloģijām



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



anterior
matricas

jaunums!

unica proximal

anterior matricas

Fokuss uz proksimālo zonu
Fokuss uz formu

Atsauksme



"Lai nodrošinātu paredzamību tiešajās kompozīta restaurācijās priekšzobu zonā, mums nepieciešams risinājums, kas ir gudrs, vienkāršs, unikāls un ekonomiski izdevīgs – īpaši attiecībā uz kontūras un restaurācijas ārējās formas veidošanu. Unica Proximal atrisina priekšējo matricu problēmas, nodrošinot vieglu matricu ievietošanu, pašnostabilizēšanos bez ķīliņu lietošanas un iespēju prognozēt ārējo kontūru, jo tā lieliski pieguļ restaurētajiem priekšzobiem bez lieka materiāla labiāli un palatēnāli. Tā ir ideāli piemērota III un IV klases restaurācijām, diastēmas slēgšanai, formas korekcijai un kompozīta venīriem. Unica Proximal ir gudrs risinājums ikdienas tiešajām estētiskajām un funkcionālajām priekšzobu restaurācijām."

Dr. Osama Shaalan,
Palestīna




Courtesy of Dr. Osama Shaalan



for more
information

SWISS
MADE

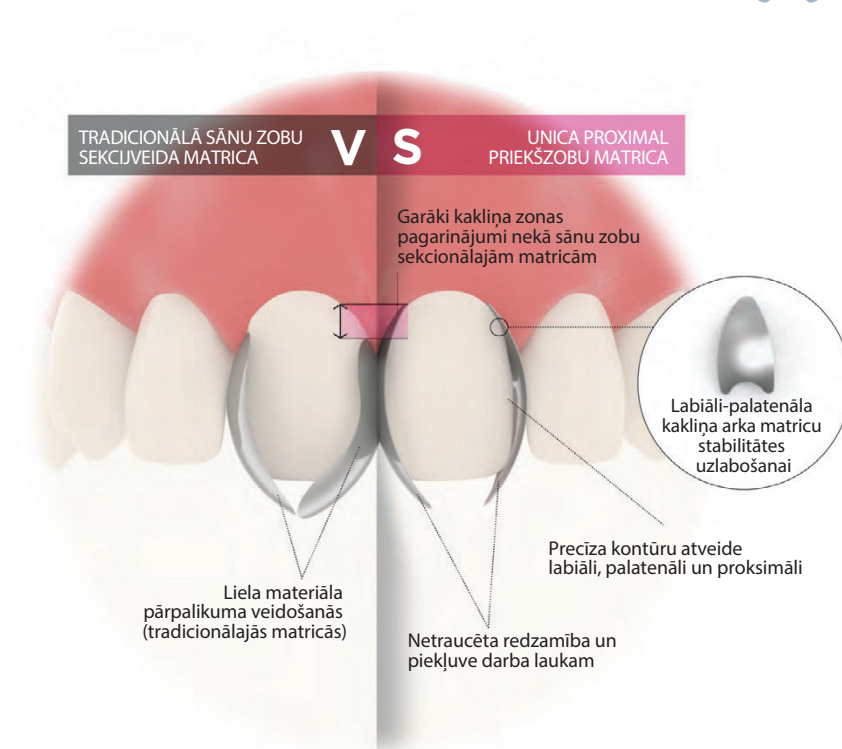


Unica Proximal nodrošina uzlabotu kontroli priekšzobu restaurācijās. Šī jaunā priekšzobu matrica novērš nepieciešamību griezt vai pārveidot esošās sānu zobu sekcionālās matricas un piedāvā formu, kas nodrošina vienkāršu un drošu adaptāciju un piekļaušanos priekšzobu zonā, vienlaikus uzlabojot redzamību un piekļuvi darba laukam.



Apskati
video

unica
proximal

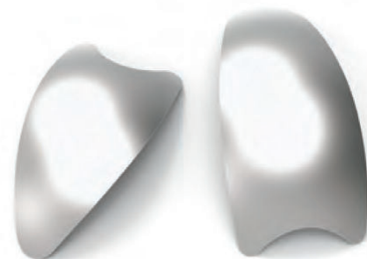

unica
proximal
deep

Unica Proximal nerūsējošā tērauda matricas ir 0,03 mm biezas un pieejamas divās formās, kas veidotas, lai atbilstu priekšzobu kontūrām labiāli, palatēnāli un proksimāli.

Unica Proximal matricas ir īpaši piemērotas priekšzobu restaurācijām, kurās iesaistītas proksimālās sienas (III un IV klases restaurācijas, pegveida laterālie incīzīvi, diastēmu slēgšana, daļēji un pilnīgi venīri). Unica Proximal Deep versija ir paredzēta periodonta lietojumiem ar plakanām papildām. Viegli ievietojamā labiāli-palatēnālā kakliņa arka paredzēta matricu nostiprināšanai starp papildu un zobu subgingivāli, lai pēc ievietošanas uzlabotu stabilitāti. Matricas nostiprināšanai var izmantot ķīlīti, taču tas nav obligāti.

Forma izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu piekļaušanos priekšzobu kontūrām, vienlaikus piedāvājot labāku redzamību un piekļuvi darba laukam nekā citas alternatīvas, piemēram, sānu zobu sekcionālajām matricām.



Unica Proximal anterior matricas – REF 6913
standarts 0.03mm, 100 gab.



Unica Proximal anterior matricas – REF 6914
standarts 0.03mm, 50 gab.



Unica Proximal deep anterior matricas – REF 6952
dziļās 0.03mm, 100 gab.



Unica Proximal deep anterior matricas – REF 6953
dziļās 0.03mm, 50 gab.

