


myQuickmat Prime

jaunums!

Esi
flamingo
baložu
barā

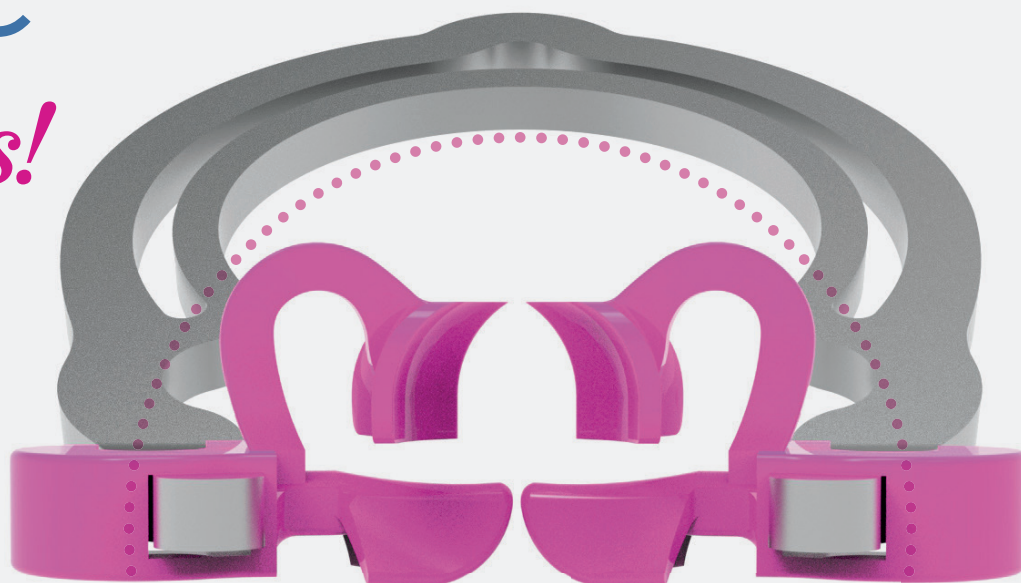

Priekšrocības

Vienkāršota sistēma sānu zobiem,
kas samazinās krēslā pavadīto laiku

Restaurācijas pamatelementi: viens
gredzens ar integrētiem ķīlīšiem un
viena anatomiska matrica
(atsevišķs ķīlītis nav nepieciešams)

Pašcentrējoša ķīlīša forma – dabiski
vadīta ievietošana, nodrošinot
efektīvu blakus esošo zobu
separāciju ar optimālu matricas
adaptāciju un cervikālo pieslēgumu

Gredzena stabilitāte:
novērš gredzena noslīdēšanu

No cervikālās līdz okluzālai virsmai
konturēta matrica ļauj precīzi
veidot kontaktpunktus

Bez kompromisiem efektivitātē
vai rezultātā: panākta vienkāršāka
un dabiskāka starpproximālās
anatomijas atjaunošana



Saki
ardievas
ķīlītim



myTines
Prime
flamingo formas

gredzena
uzgaļīši
ar integrētu
ķīlīti

sectional
matrix
system



polydentia
swiss manufacture 

jaunums! myQuickmat Prime



Saki
ardievas
ķīlītim

Atsauksme



"myQuickmat Prime ir revolucionārs risinājums, kas ne tikai vienkāršos II klases sānu zobu restaurāciju protokolu, bet arī padarīs visu procesu vieglāku un ātrāku. Pareiza proksimālā kontakta izliekuma iegūšana vienmēr ir bijis izaicinājums II klases restaurācijās, taču, kombinējot jauno Quickmat Prime un myRing Prime, tas nekad nav bijis tik vienkārši vai ekonomiski izdevīgi. Īsāk sakot – īsts spēles mainītājs manām II klases restaurācijām."

Dr. Javier Tapia,
Spānija



Attēli no Dr. Javier Tapia arhīva



for more
information

gredzena uzlikas
ļoti efektīvi formē
matricu proksimāli



flamingo formas

myTines Prime

ķīļveida, vairākkārt lietojamas un
autoklāvējamas myRing Prime
gredzena uzlikas



BILATERĀLI INTEGRĒTI ĶĪLĪŠI



- pašcentrējoši, dabīgai pozīcijai ievietojot
- efektīva blakus esošo zobu separācija
- veiksmīgi veido matricu cervikālajās sienās
- neļauj gredzenam noslīdēt

myRing Prime

nerūsējošā tērauda
sekcionālo matricu
gredzens

- ieliekts gredzens,
lai tas netraucētu blakus
esošajiem zobiem



Quickmat Prime


anatomiskās sekcionālās
matricas, konturētas no
cervikālās līdz okluzālajai daļai



- precīza kontaktpunkta pozicionēšana
- viena izmēra matrica gan premolāriem, gan molāriem
- centrālā augšējā cilne ērtai pozicionēšanai
- stingra, bet viegli pielāgojama


Quickmat Prime

- dabiski izliekta anatomija
- kontakta punkts
novietots tuvu centram

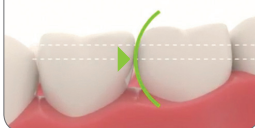

Tradicionālā sekcionālā matrica

- "taisna" zoba anatomija
- augsts kontakta punkts

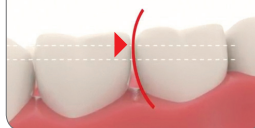

skatīties
video

myQuickmat Prime ir sekcionālās matricas sistēma, kas izstrādāta, lai vienkāršotu visas II klases restaurācijas procedūras un samazinātu darbam nepieciešamo laiku.

Ķīlīša izņemšana kā daļa no restaurācijas procesa padara sistēmu vienkāršāku, ātrāku un gudrāku nekā tradicionālās sekcionālo matricu sistēmas.

myQuickmat Prime komplekts REF 6890

- 2 gab. – myRing Prime gredzens
- 10 pāri – myTines Prime gredzena uzlikas
- 100 gab. – Quickmat Prime matricas



Papildus iepakojumi

- myRing Prime – REF 6891
2 gab. myRing Prime gredzeni, 4 pāri myTines
- myTines Prime – REF 6892
6 pāri myTines Prime uzlikas
- Quickmat Prime – REF 6893
100 gab. anatomiskās sekcionālās matricas

