

Ko Tu lieto tajos gadījumos, kad nevari izmantot kompozītu?

Mēs visi esam saskārušies ar šādiem gadījumiem. Kariozs zobs, bet šoreiz ļoti grūti nodrošināt sausu darba lauku, vai pacients, kam nepieciešams rentabls risinājums. Vai tie sarežģītie gadījumi, kad tu vēlies kaut būtu tāds plombējama materiāls, kura izmantošana ir ātra un nav tehniski sarežģīta. Tādu, kas viegli lietojams, bet vienlaikus ir stiprs un kvalitatīvs.



Vai esi apsvēris EQUIA Forte® HT?



Kas tajā ir domāts Tev?

- ✓ Pierādīta rentabilitāte un veiktspēja
- ✓ Ātri un viegli – izmantojams vienas porcijas plombēšanas tehnikā, biežslāņa restaurācijas materiāls, kuru ir ērti aplicēt
- ✓ Izturīgs pret mitrumu – nav nepieciešams izmantot koferdamu
- ✓ Pašadhezīvs un biosaderīgs materiāls
- ✓ Nav nepieciešams pirms restaurācijas izmantot adhezīvu un veikt kodināšanu

Īpaši piemērots šādos gadījumos:

- ✓ Alternatīva amalgāmai
- ✓ Molāru incīzīvu hipomineralizācija
- ✓ Piemērots slodzi nesošām II klases restaurācijām*
- ✓ Dziļu kariozo bojājumu restaurācijām
- ✓ I un V klases restaurācijām


15

Ļoti daudzi zobārsti jau ir pārliecināti un klīniskajā praksē izmanto to, EQUIA Forte HT **hibrīdstikla restaurāciju** skaits Eiropā ir pārsniedzis **15 miljonus**. Un turpinām skaitīt.

Mēs esam gatavi nākamajai kārtai. Vai Tu piedalies?

*Read instructions for use for the recommended cavity size

Unikālā hibrīdstikla tehnoloģija

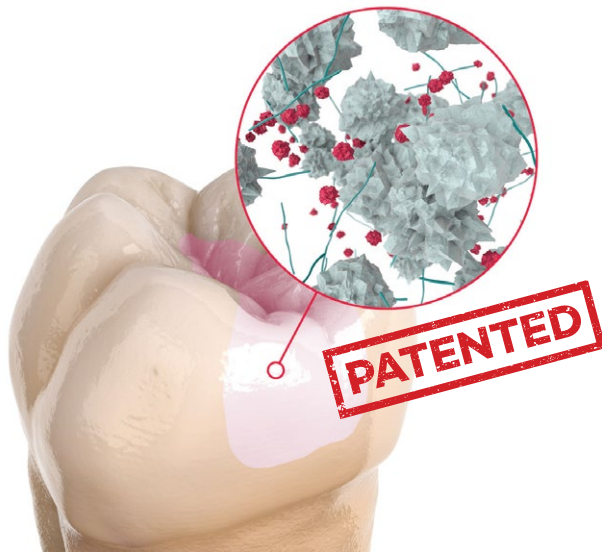

- Patentētā hibrīdstikla tehnoloģija tiek izmantota EQUIA Forte un EQUIA Forte HT: fluoralumīnija silikāta stikls, kas papildināts un stiprināts ar maza izmēra, ļoti reaktīvām silikāta daļiņām **Uzlabota cietēšanas reakcijas kontrole, uzlabotas materiāla mehāniskās īpašības.**
- Unikāla poliakrilskābe ar augstu molekulāro svaru **Uzlabotas mehāniskās īpašības, uzlabotas lietošanas ērtības**

PAPILDUS INFORMĀCIJAS
IEGŪŠANAI NOSKENĒ ŠO



EQUIA saime: klīniskie pētījumi

EQUIA®

1 year/CLASS V Vaid DS et al. J Conserv Dent 2015 Nov-Dec 18(6):449-52. doi: 10.4103/0972-0707.168805

2 years/CLASS II Friedl K et al. Dent Mater 2011 Oct;27(10):1031-7. doi: 10.1016/j.dental.2011.07.004

3 years/CLASS V Celik U et al. Clin Oral Investig 2019 Mar;23(3):1473-1480. doi: 10.1007/s00784-018-2575-y

3 years/CLASS II Fotiadou C et al. Quintessence Int 2019;50(8):592-602. doi: 10.3290/j.qi.a42692

4 years/CLASS II Klinke T et al. Trials 2016 May 8;17(1):239. doi: 10.1186/s13063-016-1339-8

6 years/CLASS II Türkün S et al. OperDent 2016 Nov/Dec;41(6):587-598. doi.org/10.2341/15-331-C

7 years/CLASS I, II & V Basso M et al. J Dent Res Vol 95 (Spec IssB): 0446. 2016.doi: 10.13140/RG.2.1.1603.2249

10 years/CLASS II Gurgan S et al. J Dent 2020 Mar; 94:103175. doi: 10.1016/j.jdent.2019.07.013

EQUIA Forte®

2 years/CLASS V Vural U et al. Clin Oral Investig 2020 Mar;24(3):1229-1238. doi: 10.1007/s00784-019-02986-x

2 years/CLASS II Miletic I et al. J Adhes Dent. - link 2020;22(3):235-247. doi: 10.3290/j.jad.a44547

3 years/CLASS V Schwendicke F et al. J Dent (2021) 103689. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2021.103689

3 years/MIH affected teeth Tugcu N et al. IAPD 2020 iapdworld.org/congress-3/iapd20-virtual, abstract book p.1076

4 years/CLASS II Gurgan S et al. J Dent Res Vol 99 (Spec Iss A): 1389

Pārbaudi savas zināšanas

1. EQUIA Forte HT restaurācijas materiāls ir piemērots izmantošanai II klases kavitātēs **pareizi/nepareizi**
2. Pirms EQUIA Forte HT restaurācijas ir vajadzīgs izmantot adhezīva sistēmu **pareizi/nepareizi**
3. Pirms EQUIA Forte HT restaurācijas ir jāveic kavitātes kodināšana ar 37% fosforskābi **pareizi/nepareizi**
4. EQUIA Forte HT restaurācijas materiāls ir piemērots gan pastāvīgo, gan piena zobu atjaunošanai **pareizi/nepareizi**
5. EQUIA Forte HT restaurāciju dzīvildze klīniskajos pētījumos ir līdzīga kompozitmateriālam **pareizi/nepareizi**
6. EQUIA Forte HT sastāvā ir bisfenols **pareizi/nepareizi**

1. Pareizi / 2. Nepareizi / 3. Nepareizi / 4. Pareizi / 5. Pareizi / 6. Nepareizi